

# TABLE OF CONTENTS

Tratamento de Feridas

Feridas

Desbridantes

Impregnados Simples

Filmes Hidrocloides

Solução de Limpeza da Ferida

Material de Fixação e Proteção

Irrigação Ferrida

2

2

5


8

9

13


15

17

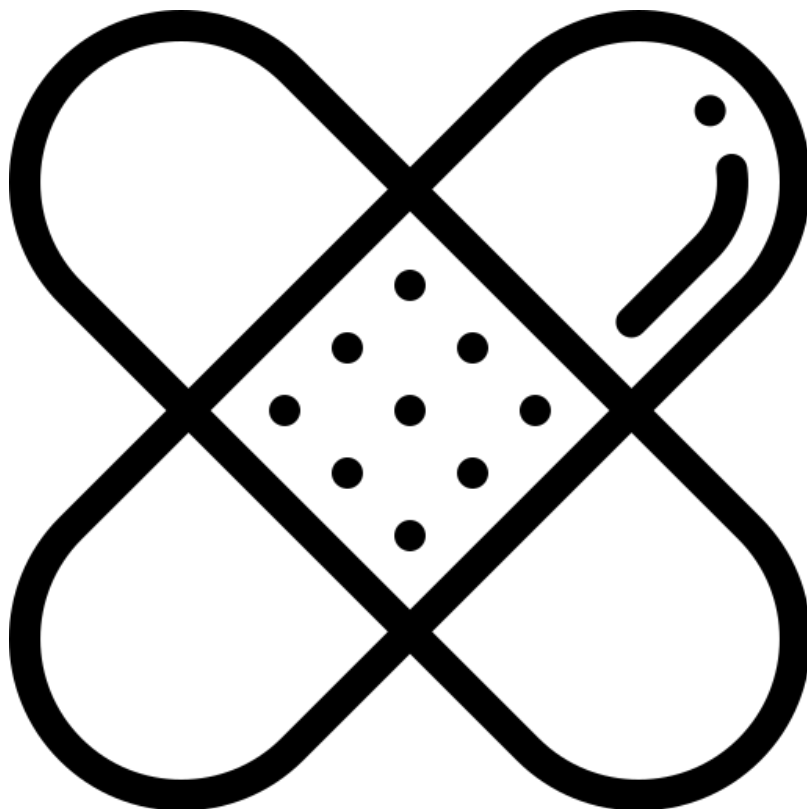

# **TRATAMENTO DE FERIDAS**

## **FERIDAS**

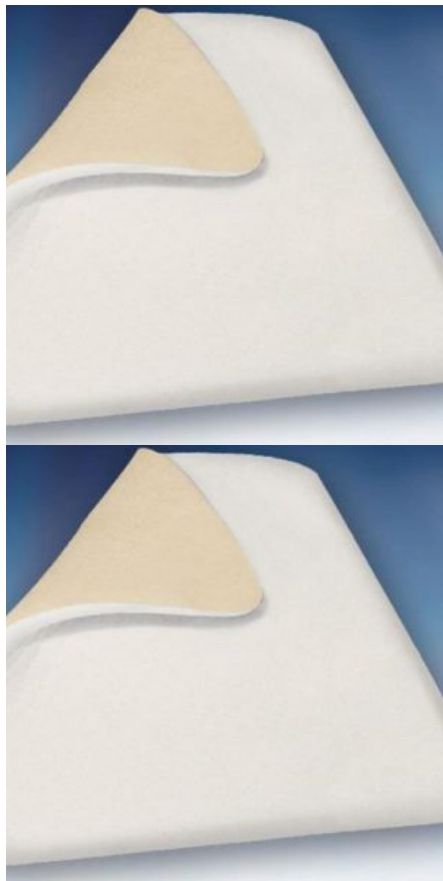

## **LUOFUCON FOAM SEM REBORDO 10 X 10 CM, CX 10 UNI**

Penso de espuma de poliuretano esterilizado, suave, maleável não adesivo Luofucon Foam Dressing sem rebordo 10x10cm

### **Descrição do produto:**

LUOFUCON Foam é um penso de poliuretano suave, maleável e não aderente, com capacidade de absorção e retenção de fluidos, utilizado para gerir feridas com exsudado ligeiro a moderado.

Possui uma camada exterior de PU que impede o repassamento do exsudado, mas que permite as trocas gasosas de oxigénio e de vapor de água. Esta película exterior protege a ferida e é impermeável a bactérias, evitando a contaminação cruzada, condição crítica nalgumas feridas.

LUOFUCON Foam é permeável às trocas gasosas, permite a respiração da pele e mantém húmido o leito da ferida, pelo que fornece as condições ideais para a evolução do processo de cicatrização.

### **Composição:**

Penso estéril de poliuretano (PU), sem rebordo adesivo constituído por:  
1 camada externa de poliuretano/filme semipermeável sem rebordo adesivo;

1 camada interna de poliuretano absorvente (espuma hidrofílica) e de interface não aderente.

### **Modo de aplicação:**

Limpe a ferida de acordo com os procedimentos habituais.

Escolha um penso com o tamanho e forma adequados à ferida.

Aplique o penso diretamente sobre o leito da ferida, mantendo a superfície corada para cima.

LUOFUCON Foam sem rebordo pode ser cortado.

Fixe LUOFUCON Foam sem rebordo no local da forma mais apropriada, com adesivo, ligadura ou um penso secundário adequado.

Quando substituir LUOFUCON Foam deve ser mudado quando alcançar a sua capacidade máxima de absorção, ou logo que se observar o extravasamento lateral da espuma, podendo permanecer na ferida até 7 dias.

### **Propriedades:**

Espuma hidrófila de poliuretano

Capacidade de absorção moderada

Elevada capacidade de retenção de exsudado

Mantém o ambiente húmido

Respirável

Impermeável a bactérias

Parte superior de reduzido atrito

Macio e confortável

### **Indicações:**

LUOFUCON Foam é adequado para feridas exsudativas agudas e crónicas, incluindo:

Cortes e abrasões

Queimaduras superficiais

Bcare , Produtos de Saúde, tratamento de feridas crônicas ,  
incontinência urinária , desinfetantes e material descartável.

Feridas cirúrgicas  
Úlceras de perna  
Úlceras de pressão  
Úlceras diabéticas

Advertências:

Não aplicar em feridas com sangramento arterial nem em tumores  
vasculares malignos.

[consulte Mais informação](#)

**SKU:** FD100100U

**Preço:** 14.36€

# DESBRIDANTES

## URGOCLEAN 10X10 (10) FIBRAS POLIABSORVENTES CICATRIZANTES /



**URGOCLEAN: AÇÃO DE LIMPEZA COMPLETA PARA ASSEGURAR A CICATRIZAÇÃO DA LESÃO**

**NECESSIDADE CLÍNICA E INDICAÇÃO**

O processo de cicatrização da lesão pode ser interrompido levando à ativação da inflamação persistente: acumulação contínua de células no local da lesão; edema perilesional, e aumento do exsudado e maior produção de células mortas e

outros detritos da lesão. Uma lesão limpa é essencial para a cicatrização da mesma. A preparação eficaz do leito da lesão permite:

gerir a inflamação, reduzindo assim o nível do exsudado<sup>1</sup>

reduzir o risco de infeção<sup>2</sup>

prosseguir com a fase de granulação e assegurar a cicatrização da lesão<sup>3</sup>

**Indicação:** O UrgoClean proporciona uma ação de limpeza completa para assegurar a cicatrização da lesão e é indicado para a fase de eliminação das células mortas das lesões com exsudado do tipo crónico (úlceras vasculares, úlceras por pressão, úlceras de pé diabético), ou lesões agudas (queimaduras, abrasões de pele, lesões traumáticas, lesões de pós-operatório) e lesões cancerígenas. **ESCRITA** categoria do produto: penso desbridante com fibras de poliácrlato revestido com uma camada de TLC cicatrizante microaderente (suave) composta por partículas de carboximetilcelulose e substâncias lipofílicas. **composição:** Penso desbridante não-tecido e esterilizado composto por fibras de poliácrlato com um núcleo acrílico contendo amónio, que promovem atração electrostática<sup>4</sup>, revestida por uma matriz de cicatrização microaderente (suave) (TLC: Tecnologia Lipido-Colóide, composta por partículas de carboximetilcelulose e substâncias lipofílicas).

**PROPRIEDADES CICATRIZANTES**

O UrgoClean proporciona uma ação de limpeza completa da lesão (células mortas, exsudado, bactérias).

Em contacto com o exsudado da lesão, a matriz de cicatrização TLC forma um gel, criando um ambiente húmido e favorável à cicatrização da lesão. Em simultâneo, as fibras de poliácrlato de amónio gelificam e aglutinam-se aos

resíduos bacterianos e de células mortas através de interações electrostáticas<sup>4</sup>, absorvendo-as e aprisionando-as no

penso. O UrgoClean absorve o exsudado sem maceração<sup>5</sup>, protegendo assim a pele perilesional.

O penso é removido com segurança num bloco graças à resistência das fibras poliabsorventes<sup>8</sup>.

O UrgoClean assegura cuidados atraumáticos e indolores para o paciente com o ambiente húmido proporcionado pela matriz de cicatrização TLC.

Outras propriedades:

O UrgoClean aprisiona as bactérias<sup>6</sup>, limitando deste modo a

proliferação bacteriana.

O UrgoClean gere hemorragias menores devido às suas propriedades hemostáticas<sup>7</sup>.

O UrgoClean pode ser cortado e utilizado com um penso secundário.

O UrgoClean pode ser utilizado sob uma ligadura de compressão, quando prescrito. EVIDÊNCIAS CRUCIAIS estudo clínico controlado europeu multicentro em 159 pacientes<sup>5</sup>

Relativa redução do tecido com células mortas (%) na semana 6:

UrgoClean 65,3% > Aquacel® 42,6%, p=0,013

% de lesões sem células mortas na semana 6: UrgoClean 52,5% > Aquacel® 35,1%, p=0,033

Aceitação:

- não-adesão à lesão: UrgoClean 63% > Aquacel® 36%

- remoção do penso indicada como muito fácil: UrgoClean 64% > Aquacel® 47%

#### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Peso total: 310-420 g/m<sup>2</sup>

Sem látex e isento de ftalatos e substâncias CMR (Carcinogénicas, Mutagénicas, Reprotóxicas)

Capacidade de absorção em 1/2 h, de acordo com a norma EN 13726-1 Parte 3.2: = 1500 g/m<sup>2</sup>

Vida útil: 3 anos

Armazenar longe da luz e humidade a uma temperatura inferior a 25 °C Esterilizado, em conformidade com a ISO 11137. Beta radioesterilizado.

Utilização única

Marca CE 0459 Dispositivo médico categoria IIb

Organismo notificado: LNE/G-MED - França

Fabricado em França.

Fabricante legal: Laboratoires URGO, 42 rue de Longvic, 21300

Chenôve França

Nome do local de produção e endereço: Laboratoires Urgo, 2 avenue de Strasbourg Parc Excellence 2000 - 21800 Chevigny Saint Sauveur, França

[consulte Mais informação](#)

**SKU:** 506452

**Preço:** 45.77€



## PRONTOSAN® GELX 50 G

Prontosan® gel X 50 g é um hidrogel estéril que contém polihexametileno biguanida e betaína que aceleram o processo de cicatrização. Conjuntamente limpam, hidratam e fragmentam o biofilme, de forma a remover bactérias e detritos. A consistência altamente viscosa do hidrogel permite que este se mantenha na ferida e exerça a sua função durante um maior período de tempo, facilitando a hidratação e a remoção de incrustações. Está indicado para a limpeza de feridas de maior superfície, assim como queimaduras de III e IV graus.

[consulte Mais informação](#)

**SKU:** 400517

**Preço:** 27.30€



## PRONTOSAN® GELX 250 G

Prontosan® gel X 250 g é um hidrogel estéril que contém polihexametileno biguanida e betaína que aceleram o processo de cicatrização. Conjuntamente limpam, hidratam e fragmentam o biofilme, de forma a remover bactérias e detritos. A consistência altamente viscosa do hidrogel permite que este se mantenha na ferida e exerça a sua função durante um maior período de tempo, facilitando a hidratação e a remoção de incrustações. Está indicado para a limpeza de feridas de maior superfície, assim como queimaduras de III e IV graus.

[consulte Mais informação](#)

**SKU:** 400508

**Preço:** 44.97€

# IMPREGNADOS SIMPLES



## ASKINA® SOFT I.V. 8X6 CM

Askina® Soft I.V. é um penso, esterilizado e hipoalergénico, indicado para a fixação de catéteres. Possui uma almofada não aderente e absorvente que mantém seco o local da punção. Dimensões 8 x 6 cm


[consulte Mais informação](#)

**SKU:** 9086919

**Preço:** 18.09€



# FILMES HIDROCLOIDES

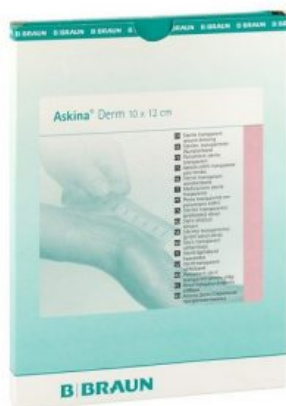


## ASKINA DERM 15X20 CM 10 UNI

O Askina® Derm é um penso estéril, transparente em filme de poliuretano, revestido com adesivo acrílico elástico. É semipermeável, mantendo o ambiente húmido ideal para a cicatrização. Protege a pele recém formada e previne a formação de cicatrizes. Está indicado para feridas não exsudativas, nomeadamente úlceras de pressão de categoria I, queimaduras de I grau, feridas cirúrgicas e pequenas abrasões. Dimensões: 15 x 20 cm

[consulte Mais informação](#)

**SKU:** F72038

**Preço:** 34.22€

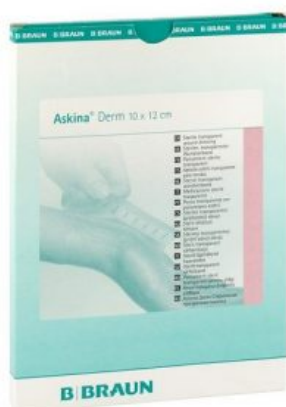


## ASKINA DERM 10X20 CM 10 UNI

O Askina® Derm é um penso estéril, transparente em filme de poliuretano, revestido com adesivo acrílico elástico. É semipermeável, mantendo o ambiente húmido ideal para a cicatrização. Protege a pele recém formada e previne a formação de cicatrizes. Está indicado para feridas não exsudativas, nomeadamente úlceras de pressão de categoria I, queimaduras de I grau, feridas cirúrgicas e pequenas abrasões. Dimensões: 10 x 20 cm

[consulte Mais informação](#)

**SKU:** F72037

**Preço:** 2.31€

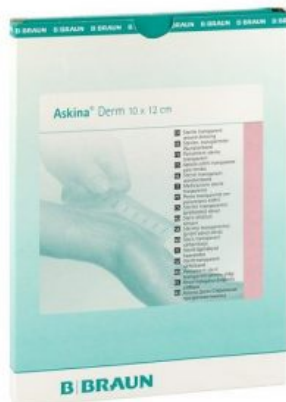


## ASKINA DERM 10X12 CM 50 UNI

O Askina® Derm é um penso estéril, transparente em filme de poliuretano, revestido com adesivo acrílico elástico. É semipermeável, mantendo o ambiente húmido ideal para a cicatrização. Protege a pele recém formada e previne a formação de cicatrizes. Está indicado para feridas não exsudativas, nomeadamente úlceras de pressão de categoria I, queimaduras de I grau, feridas cirúrgicas e pequenas abrasões. Dimensões: 10 x 12 cm

[consulte Mais informação](#)

**SKU:** F72036

**Preço:** 73.46€

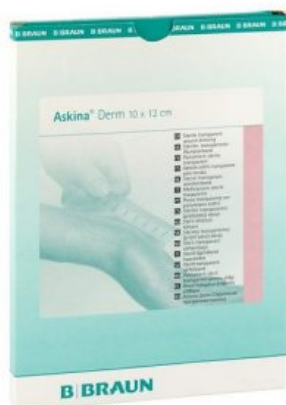

## ASKINA DERM 6X7 CM 100 UNI

O Askina® Derm é um penso estéril, transparente em filme de poliuretano, revestido com adesivo acrílico elástico. É semipermeável, mantendo o ambiente húmido ideal para a cicatrização. Protege a pele recém formada e previne a formação de cicatrizes. Está indicado para feridas não exsudativas, nomeadamente úlceras de pressão de categoria I, queimaduras de I grau, feridas cirúrgicas e pequenas abrasões. Dimensões: 6 x 7 cm

[consulte Mais informação](#)

**SKU:** F72033

**Preço:** 96.16€




## VARIHESIVE GEL CONTROL SEM REBORDO 10X10CM CX10UNI

O penso VariHesive® Gel Control é um penso estéril, auto-aderente, constituído por 3 hidrocolóides (carboximetilcelulose sódica, pectina e gelatina) e excipientes impregnados numa matriz de poli-isobutileno. É revestido por uma espuma de poliuretano. O penso VariHesive® Gel Control está indicado para feridas crónicas, úlceras por pressão (grau I a IV), úlceras vasculares, feridas agudas, feridas traumáticas (abrasões menores, lacerações), queimaduras de 1º e 2º grau, quistos dermóides, feridas pós-cirúrgicas (feridas pós-operatórias, zonas dadoras). As lesões devem apresentar exsudado ligeiro a moderado.

[consulte Mais informação](#)

**SKU:** 187639

**Preço:** 35.83€

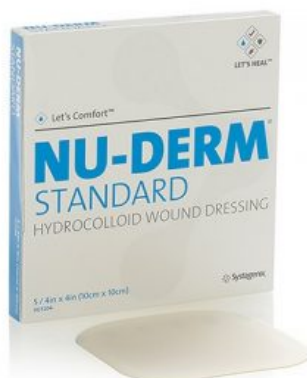

## NU-DERM HIDROCOLOIDE STANDARD 10CMX10CM CX5UNI

Os pensos NU-DERM® Hidrocolóide são desenvolvidos para ajudar a manter um ambiente húmido em feridas com nível de exsudado leve a moderado. A linha possui três modelos com uma ampla gama de formas e tamanhos. Todos os pensos são impermeáveis e podem permanecer no local durante o duche

**NU-DERM® Standard**

Tem uma camada superior em espuma de poliuretano revestida por uma película, de cantos arredondados, e de espessura uniforme. É indicado para o tratamento de feridas com nível de exsudado leve a moderado.

NU-DERM® Hidrocolóide ajuda a manter um ambiente de cicatrização húmido incentivando o desbridamento autolítico, e permitindo assim que a granulação prossiga sob condições ótimas.

Concebido para proteger as feridas de baixo risco contra a contaminação bacteriana

[consulte Mais informação](#)

**SKU:** HCF204

**Preço:** 23.84€



## NU-DERM HIDROCOLOIDE THIN 10X10CM CX10UNI

Os pensos NU-DERM® Hidrocolóide são desenvolvidos para ajudar a manter um ambiente húmido em feridas com nível de exsudado leve a moderado. A linha possui três modelos com uma ampla gama de formas e tamanhos. Todos os pensos são impermeáveis e podem permanecer no local durante o duche

### NU-DERM® Extra Fino

Variante semitransparente e adaptável, tem uma camada superior em filme de poliuretano de baixo atrito facilitando a visualização do leito da ferida sem ter que remover o penso

NU-DERM® Hidrocolóide ajuda a manter um ambiente de cicatrização húmido incentivando o desbridamento autolítico, e permitindo assim que a granulação prossiga sob condições ótimas

Concebido para proteger as feridas de baixo risco  
contra a contaminação bacteriana

[consulte Mais informação](#)

**SKU:** HCT101

**Preço:** 18.88€

# SOLUÇÃO DE LIMPEZA DA FERIDA



## PRONTOSAN WOUND SPRAY 75ML 1UNI

Prontosan® wound Spray 75 ml, contém polihexametileno biguanida e betaína que aceleram o processo de cicatrização. Conjuntamente limpam, hidratam e fragmentam o biofilme, de forma a remover bactérias e detritos. Está indicado para a limpeza de queimaduras e feridas superficiais, agudas ou crônicas. O spray é também indicado para a limpeza de portas de entrada (cateteres urológicos e transuretrais, tubos de PEG/PEJ e áreas cutâneas periestomais.

[consulte Mais informação](#)

**SKU:** 400565

**Preço:** 8.45€



## PRONTOSAN SOLUÇÃO AMPOLA 24X40ML 24UNI

Prontosan®, solução em ampolas 24 x 40 ml, contém polihexametileno biguanida e betaína que aceleram o processo de cicatrização. Conjuntamente limpam, hidratam e fragmentam o biofilme, de forma a remover bactérias e detritos. Está indicado para a limpeza de feridas agudas e crônicas e queimaduras de I e II graus.

[consulte Mais informação](#)

**SKU:** 400484

**Preço:** 50.02€



## PRONTOSAN SOLUÇÃO DE IRRIGAÇÃO 350ML

Prontosan® solução de irrigação 350 ml contém polihexametileno biguanida e betaína que aceleram o processo de cicatrização. Conjuntamente limpam, hidratam e fragmentam o biofilme, de forma a remover bactérias e detritos. Está indicado para a limpeza de feridas agudas e crônicas e queimaduras de I e II graus.

[consulte Mais informação](#)

**SKU:** 400403

**Preço:** 10.38€

# MATERIAL DE FIXAÇÃO E PROTEÇÃO



## OPER TAPE 10 CMX10 M, CX1UNI

Banda adesiva de tecido não tecido de alta permeabilidade ao O<sub>2</sub> e ao vapor de água

Tecido não tecido adaptável, extensível e de grande porosidade, revestido por um adesivo hipoalergénico.

Máxima adaptabilidade e conforto.

Barreira segura e confortável.

Ótima fixação.

Alta transpirabilidade.

Extensibilidade transversal do tecido não tecido

Banda extensível transversalmente para facilitar a fixação, inclui em partes do corpo submetidas a movimentos articulares, sem o risco de se soltar.

O adesivo acrílico hipoalergénico permite uma fixação segura e eficaz de pensos primários, catéteres e tubos.

Permeável ao O<sub>2</sub> e ao vapor de água

Alta permeabilidade ao O<sub>2</sub> e ao vapor de água devido a estrutura porosa do tecido não tecido e a um processo inovador de aplicação do adesivo.

Muito resistente a humidade graças ao adesivo acrílico que integra.

Para o paciente

Adesivo hipoalergénico apto para todo o tipo de peles, permite a sua remoção sem dor e sem deixar resíduos na pele.

Para o profissional de saúde

Zona adesiva protegida por um papel com silicone com corte ondulado incorporado que permite um rápido e fácil manuseamento.

A vasta gama de medidas de Oper tape cobre qualquer tamanho de compressa numa só aplicação, facilitando o trabalho do profissional de saúde.

[consulte Mais informação](#)

**SKU:** 0032230

**Preço:** 1.55€



## ASKINA OCULA ESTERIL 56X72MM 25UNI

Askina® Ocula® é um penso ocular esterilizado, em algodão hidrófilo, altamente absorvente. Está indicado para o tratamento e proteção de lesões oculares e feridas pós-cirúrgicas. Dimensões: 56 x 72 mm.

[consulte Mais informação](#)

**SKU:** 9015124

**Preço:** 15.64€



## ASKINA TRACHEA 9.5X8.5CM 10 UN

O Askina® Trachea é um penso de espuma hidrofílica com uma abertura circular, desenhada para rodear perfeitamente um tubo de traqueostomia, drenos ou estomas. Askina® Trachea tem uma camada interna com elevada capacidade de absorção, permeável ao vapor de água e uma camada externa impermeável a bactérias e a água.

[consulte Mais informação](#)

**SKU:** 7248510

**Preço:** 9.71€



# IRRIGAÇÃO FERRIDA



## SORO FISIOLÓGICO ECOLAV 500 ML

Cloreto de Sódio 0,9%, solução de irrigação, frasco com cânula para fluxo dirigido, 500 ml, 1 uni

[consulte Mais informação](#)

**SKU:** 3570410

**Preço:** 2.90€



## SORO FISIOLÓGICO ECOTAINER 1000ML

Cloreto de Sódio 0,9%, solução de irrigação, frasco, 1000 ml, 1 uni

[consulte Mais informação](#)

**SKU:** 3570160

**Preço:** 4.24€



# INDEX

## A

Askina Derm 10x12 cm 50 Uni 9  
Askina Derm 10x20 cm 10 Uni 8  
Askina Derm 15x20 cm 10 Uni 8  
Askina Derm 6x7 cm 100 Uni 9  
Askina Ocula Esteril 56x72mm 25uni 15  
Askina Trachea 9.5x8.5cm 10 Un 15  
Askina® Soft I.V. 8x6 cm 7

## L

Luofucon Foam sem rebordo 10 x 10 cm, Cx 10 uni 2

## N

Nu-Derm Hidrocoloide Standard 10cmx10cm cx5uni 10  
Nu-Derm Hidrocoloide Thin 10x10cm cx10uni 11

## O

Oper Tape 10 cmx10 m, Cx1uni 14

## P

Prontosan Solução Ampola 24x40ml 24uni 12  
Prontosan Solução De Irrigação 350ml 13  
Prontosan Wound Spray 75ml 1uni 12  
Prontosan® Gelx 250 G 6  
Prontosan® Gelx 50 G 5

## S

SORO FISIOLÓGICO ECOLAV 500 ml 16  
SORO FISIOLÓGICO ECOTAINER 1000ML 16

## U

Urgoclean 10x10 (10) Fibras poliabsorventes cicatrizantes / 4

## V

Varihesive Gel Control Sem Rebordo 10x10cm cx10uni 10